

ACTIV5™

用户手册

欢迎使用 Activ5™ — 首款智能等长力量训练和康复设备



ACTIV5 训练应用



Activ5 设备设计与智能手机、平板电脑等蓝牙®启用设备上运行的应用和游戏程序一起使用。请安装 App Store 或 Google Play 移动应用商店中的免费 Activ5 训练应用,并遵照屏幕上的说明,随后便可开始使用 Activ5




ACTIV5.COM

有关产品信息及如何开始使用 Activ5, 请访问网站
<https://www.activ5.com>




App Store 是苹果公司在美国及其他国家注册的服务商标。Google Play 及 Google Play 标识是谷歌公司的注册商标。

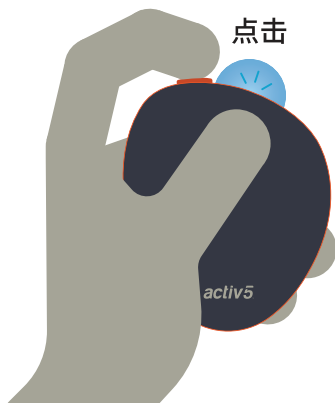打开和关闭 ACTIV5



如打开/关闭 Activ5
请持续按住电源键2秒。

LED 信号

-  蓝灯表示 Activ5 可与兼容的应用进行蓝牙连接。
-  绿灯表示 Activ5 已连接至某项应用。
-  红灯周期性闪烁表示电池电量低，需要更换。红色单次闪烁确认正常关机。

注：如在一分钟内未建立连接，或建立连接后连续7分钟闲置，Activ5 将自动关机，以维持电池寿命。

识别信息 (设备名称/序列号)

ACTIV5 标识符

Activ5 的唯一设备名称和序列号印刷在设备原包装外侧。

设备名称

设备名称用于识别蓝牙列表中的 Activ5。Activ5 与新的应用或设备第一次建立连接时，此名称将出现。

即使在配套应用、游戏程序或设备中为 Activ5 设置了昵称，设备名称也不会被删除。

序列号

序列号 (S/N) 是一个标准标识符，设置或使用Activ5时不需要序列号，但在需要帮助时，序列号可为用户支持提供辅助。如果用户丢弃了Activ5 的原包装，其还可从Activ5 电池仓内侧的贴纸上获取序列号。

| | | | |
|----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 制造商 | ACTIVBODY, INC. | 型号 | Activ5 |
| Manufacturer: | | Model: | |
| 输入电压 | DC 1.5V | CMIIT ID: | 2019DJ3324 |
| Input Voltage: | | 中国制造 | 中国制造 |
| | | Made in China | Made in China |


电池更换

Activ5 配备标准 **AAA** 电池 (**7#** 电池), 其可使用 **6-12** 个月。

更换电池时, 请按下面的简单步骤进行操作:



需准备新的 AAA 电池和一把平头螺丝刀。

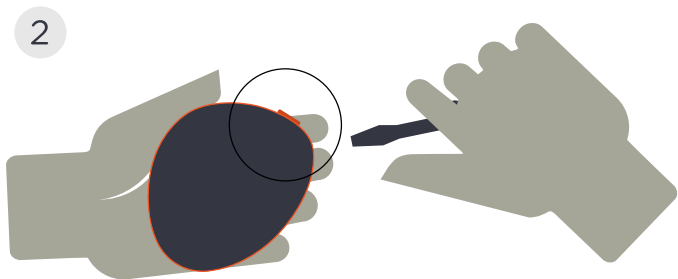


按图示握住 **Activ5** 和螺丝刀。**不应看见 **Activ5** 徽标。**

3




将螺丝刀尖端插入开口中。

4

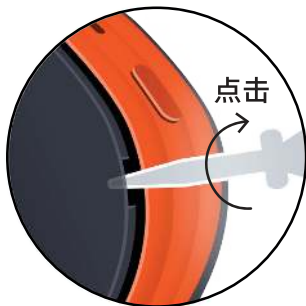

轻轻转动，直到听到一声“咔哒”声为止。盖子微微弹出，随即打开。

5

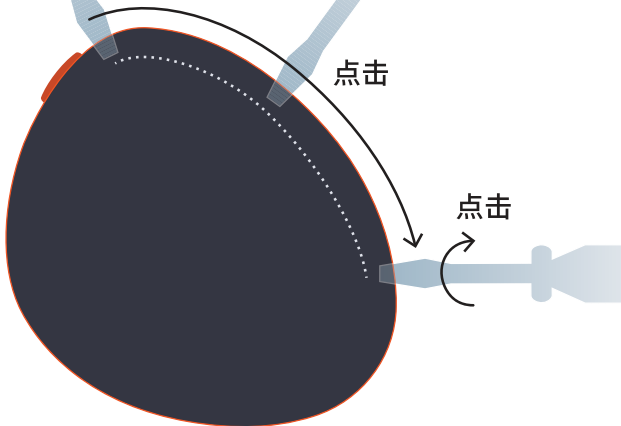


沿 Activ5 的边缘轻轻滑动螺丝刀，使尖端保持在裂缝内，直至达到图中所示的点为止。然后停止滑动，开始轻轻转动，直到听到一声“咔哒”声为止。现在，盖子已打开，请小心地取下盖子。

6



更换电池。

7

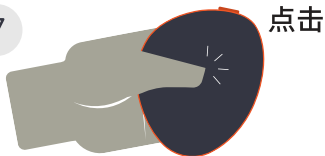

完成更换后，请将盖子扣回。

(警告) 如试图以其他方式打开 ACTIV5，可能会损坏盖子的锁扣。

用途、安全、维护和故障排除

用途

将 Activ5 放在两个身体部位(如:手掌)之间或放在身体部位和物体(如:手掌和桌面)之间时,通过向 Activ5 的灰色外表面施加压力,可测量最大90千克/200磅的压缩力。在橙色带上或橙色带附近按压会导致力测量不准确,并且可能会造成身体损伤。

请务必遵照训练应用、游戏程序和/或指南中的说明和指导。

安全

经认证,Activ5 符合所有销售地区要求的安全标准和法规,包括电磁兼容性和危险材料相关标准和法规。如需了解更多信息,请参考网站 <https://www.activ5.com/techspecs> 上的合规性部分

防水性和可燃性

Activ5 不防水,不能浸入水或其他液体中,也不得喷洒水或其他液体。与许多消费类电子设备一样,Activ5 具可燃性,因此应远离火源或其他过热源。Activ5 的性能还可能会受到极端温度或湿度的影响。如需了解更多信息,请参考网站

<https://www.activ5.com/techspecs> 上的技术规格部分。

清洁

可使用柔软的湿布擦拭清洁 Activ5。如需更彻底的清洁,可用中

性清洁剂或70%异丙醇水溶液湿润布块后进行清洁。

复位

每次打开/关闭设备时，Activ5 均会完成一个正常的复位周期。

在极少数故障排除情况下，可能需采用硬复位。如需执行此操作，只需按照本用户手册中的电池更换说明将电池从电池仓中取出，然后装回即可。

检修和故障排除

除电池更换和复位（如本用户手册中所述）以外，Activ5 只能由授权人员进行检修。如需了解更多信息，请参考网站

<https://www.activ5.com/help> 上的扩展帮助和支持信息或联系表。

处置

示本产品不得与其他生活垃圾一同处置。电池应单独弃置，设备应弃置在适当的场所进行回收利用。请按照当地政府的处置指南和/或电子零件回送系统的要求，将这些项目与其他类型的废弃物区分开，并以负责任的方式进行回收。还可以参考网站

<https://www.activ5.com/disposal> 上的说明。



© 2013 - 2019 ActivBody, Inc. 版权所有。Activbody、Activ5、Exercise Anywhere、Tiny Gym in Your Pocket 和 Activ5 标识均为 Activbody, Inc. 的商标。
Pat.: www.activ5.com/patents